


Compresor de aire silencioso Jun-Air

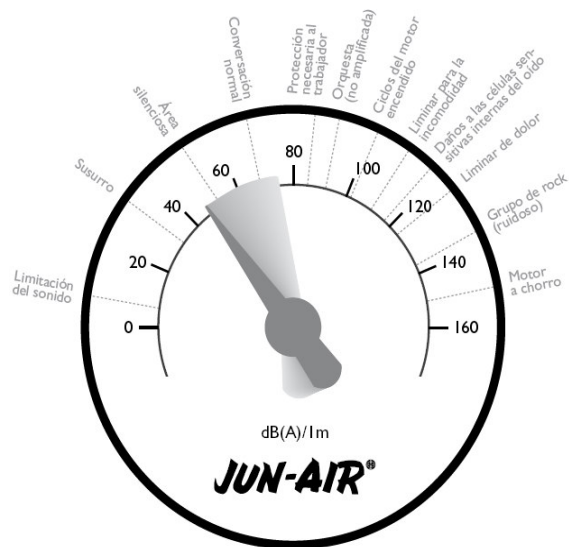

Características

Compresor de aire compacto y silencioso de mínimo mantenimiento para alimentación de un ventilador mecánico para respiración asistida.

El motor está montado sobre muelles dentro de la carcasa para evitar que las vibraciones produzcan ruido. El compresor incorpora unos pies de goma que disminuyen las vibraciones. El nivel de ruido es de 45 dB, menor que una nevera, por lo que puede ser instalado dentro de un quirófano

Especificaciones

Nivel de ruido:	45 dB
Caudal:	50 l/min
Volumen del tanque:	15 l
Presión máxima:	8 bar
Motor:	0,46 HP / 0,34 kW
Voltaje:	230 V
Consumo:	2,9 A
Tamaño:	37,8 x 37,8 x 48,5 cm
Peso:	26 kg

Código: JA-6-15

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

B. Braun VetCare SA