

Safil®

Easyslide

Seguro, suave, resistente



Sutura sintética de ácido poliglicólico, absorbible trenzada e impregnada.

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Última generación en sintéticos absorbibles.

Conservando las excelentes prestaciones de Safil®, nace una nueva generación de nuestro sintético absorbible:

- Safil® tiene un periodo de resistencia útil superior a dos semanas con perfil constante de degradación:

70% fuerza tensil inicial	14 días
36% fuerza tensil inicial	21 días

- Safil® está provisto de agujas de óptima calidad **Easyslide** fabricada con acero 300

- Safil® es la sutura ideal para el cierre de tejidos blandos. Está especialmente indicado en:

- Cirugía abdominal
- Cirugía de urinario y genital
- Cierre de planos musculares
- Sutura de mucosas
- Cierre de piel
- Ligadura de vasos sanguíneos




Resistente

Con la garantía de siempre





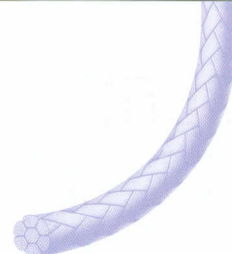




La resistencia a la tensión lineal de Safil® está por encima de los estándares de mercado. La logramos gracias:

- Al ácido Poliglicólico puro del que está compuesto Safil®.
- A su estructura microfibrilar trenzada, que garantiza resistencia hasta el final de su vida útil.

[illegible]

Safil®

Easyslide


Aguja			Hilo long. cm	USP métrico							
long. mm				6/0 0.7	5/0 1	4/0 1.5	3/0 2	2/0 3	0 3.5	1 4	2 5
Aguja 3/8 de círculo punta triangular											
			45 70	428403	428407 428411						
			45			428423					
			70				428460	428463	428466		
			70					428472	428474		
Hebras											
3 hebras de 45 cm			3 x 45				427812	427819	427826		
1 hebra de 140 cm			1 x 140						427882	427884	427886
Aguja			Hilo long. cm	USP métrico							
ang°	long. mm	diámetro micras		10/0 0.2	9/0 0.3	8/0 0.4	7/0 0.5	6/0 0.7	5/0 1	4/0 1.5	3/0 2
Aguja micro 3/8 de círculo lanceta											
			8 15	427991	427993	428013					
			30			428025					
			30			428015					
			30			428029					
Aguja micro 1/8 de círculo lanceta											
			8	427987							

Seguro

Una buena cirugía requiere un excelente anudado

Gracias al revolucionario impregnado de POLIGLICONATO, Safil® proporciona el anudado ideal:


- Efecto antideslizamiento desde la primera lazada
- Fácil reposicionamiento del nudo hacia planos profundos
- Anudado seguro y resistente durante la cicatrización de la herida

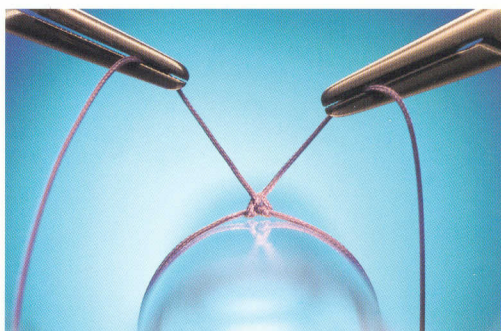

Suave

Delicado con los tejidos y con sus manos

- La superficie suave de Safil® facilita su paso a través del tejido y evita el "efecto sierra".
- Safil® proporciona un cómodo manejo gracias a su alta flexibilidad

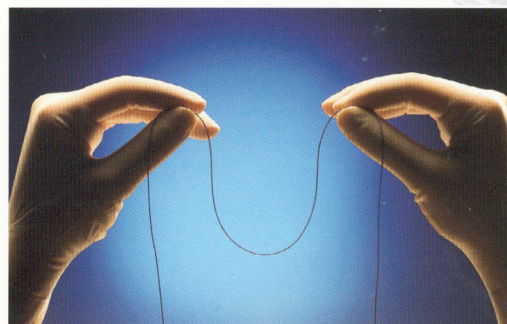

Safil®

Easyslide



Datos técnicos

Estructura	Multifilar, trenzado
Composición química	100% ácido Poliglicólico
Impregnado	Poligliconato
Color	Violeta
Calibres	USP 2 – 8/0 trenzado USP 9/0 – 10/0 monofilar
Perfil de degradación	14 días post implantación 70 % resistencia inicial 21 días post implantación 36 % resistencia inicial
Absorción de la masa	Degradación por hidrólisis en 60 – 90 días
Indicaciones	Cirugía abdominal, cirugía urogenital, sutura de mucosas, sutura de planos musculares, sutura de piel, ligadura de vasos sanguíneos
Esterilización	Óxido de Etileno

B | BRAUN

SHARING EXPERTISE

División Veterinaria

B. Braun Surgical SA
Ctra. de Terrassa, 121
08191 Rubí (Barcelona)

Servicio Atención Clientes
Teléfono 902 120 020
Telefax 93 697 45 28
e-mail: vet.es@bbraun.com