

Pulsaclean®

Sistema desechable de lavado pulsátil para ser usado junto con **LavaSurge®**, solución salina estéril u otras soluciones aplicables con o sin extractor de vacío.

Características de Pulsaclean®:

- Dispositivo adecuado para ser utilizado en quirófano, prequirófano y salas de curas.
- **Limpieza intensa, pero suave** debido a la presión de riego de > 10 psi.
- Sistema con boquillas cortas (para rodilla) y largas (para cadera) para diferentes indicaciones.
- Disponibilidad de un cepillo para canal femoral que permite una limpieza intensa en el canal medular.
- Fácil aplicación mediante fijación de boquilla con un «clic».
- Funciona con pilas alcalinas (AA).
- Duración de funcionamiento y potencia de hasta 30 min en uso continuo.
- Pieza de mano ligera <130 g gracias a una batería externa paquete.
- Dispositivo de suspensión fácil con un cable flexible para la batería.
- Dos etapas de flujo con diferentes caudales.
- Pieza de mano de diseño ergonómico con enjuague integrado de 3 m y tubos de succión.
- Permite eliminar la solución de desecho mediante succión al conectar el tubo de enjuague a un aspirador quirúrgico.

Indicaciones


Para limpieza de:

- Heridas abiertas
- Tejidos blandos
- Heridas intraoperatorias
- Limpieza profunda del lecho óseo al realizar la **artroplastia de rodilla y artroplastia de cadera**.


LavaSurge®



Pulsaclean®

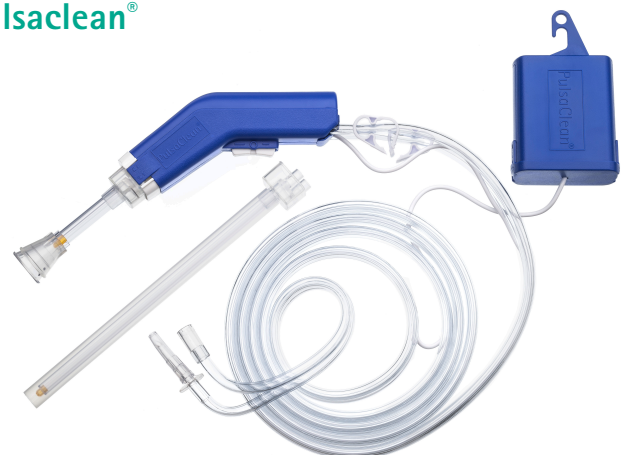

- 1. Boquilla corta
- 2. Pieza de mano
- 3. Clamps para tubos de succión y tubos de enjuague
- 4. Batería con dispositivo de suspension y cable flexible
- 5. Boquilla larga
- 6. Tubo de enjuague
- 7. Tubo de succión

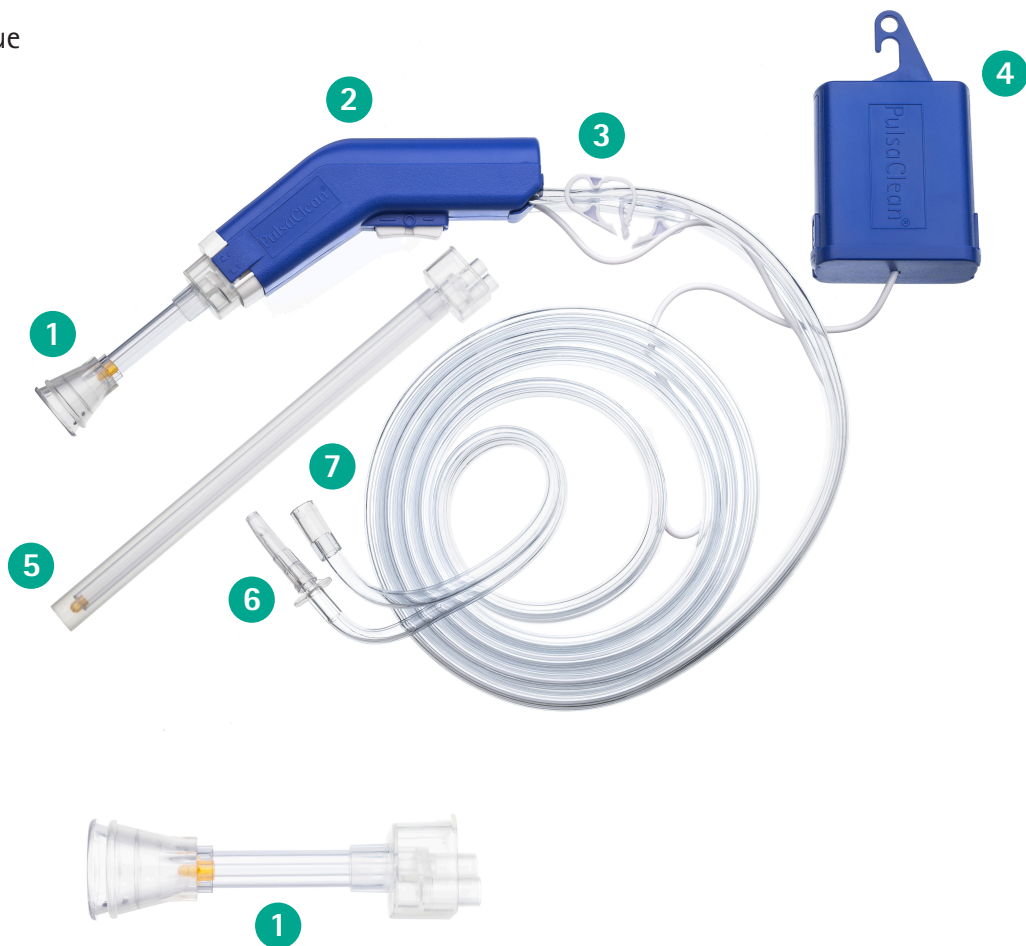

Código	Descripción	Uds.
AAP-LD-1000	Pulsaclean® sistema de lavaje desechable	1
AAP-LD-1010	Pulsaclean® p. canal femoral desechable	5
AAP-LD-1020	Pulsaclean® adaptador rodilla desechable	5

B. Braun VetCare, S.A. | Ctra. de Terrassa, 121 | 08191 Rubí (Barcelona)
Teléfono 902 47 47 01 | Fax 902 48 48 01 | atencioncliente.vetcare@bbraun.com | www.bbraun-vetcare.es

